

福祉用具レンタル卸業者様・介護ショップ様用
車いす・歩行車 タイヤ洗浄機



クルット Clutto

新登場

特許出願済

手洗いでは手間のかかるタイヤ洗浄作業がボタン一つで行えます。



洗浄時間10分での仕上がり例



多くの種類の車いす・歩行車に対応しています。

瞬間セット!

セット作業は、とても簡単。



スムーズに動くブラシをスライドさせ前後ピッチを調整、レバーを回してロックします。片手で簡単に装着できるサイドブラシをセットして完了です。



バッチリ洗浄!

タイヤ全体がきれいに。




サイドブラシがタイヤの両側にしっかりと接触するため、タイヤ全体がきれいになります。



簡単メンテ!

作業者思いの設計。

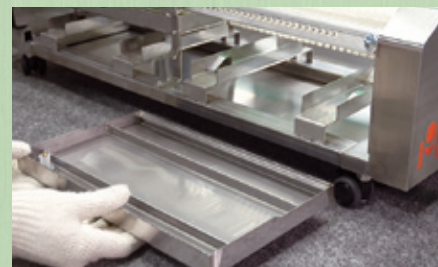

液槽は簡単に取り外せるので丸洗いが容易です。また、半割ブラシの採用で交換が簡単に行えます。





様々な形状の車いす・歩行車のタイヤを簡単にスピーディに洗浄する
全く新しい発想のタイヤ洗浄機です。

錆びないオールステンレス製



- 瞬間セットで、トータル洗浄時間を大幅短縮。
- タイヤの丸み(ゴム)部分を全てきれいに。
- 液槽はワンタッチ取り出しで丸ごと洗浄可能。
- 泡立ちを抑えた専用アルカリ洗剤で素早いすすぎを実現。

■主要諸元



名 称		車いす・歩行車 タイヤ洗浄機	
型 式		TC01-1	
洗 浄 方 式		回転ブラシ + 固定ブラシ方式	
寸 法	幅	957mm	
	奥行き	995mm（最大1188mm）	
	高 さ	988mm（本体318mm）	
質 量		75kg	
洗 浄 可 能 寸 法 ※1	タイヤ左右ピッチ	最大(タイヤ外寸)	660mm
		最小(タイヤ内寸)	80mm
	タイヤ前後ピッチ	最 大	550mm
		最 小	230mm
	タイヤ径	最 大	609.6mm（24インチ）
		最 小	101.6mm（4インチ）
	タイヤ幅	最 大	56mm
		最 小	20mm
最 大 搭 載 質 量		40kg	
電 源		単相100V（50/60Hz）	
モ ー タ ー 出 力		60W × 2個	
洗 浄 設 定 時 間		標準 5～10分（汚れにより調整可）※2	
洗 浄 液 使 用 量		1槽あたり約1L（4槽合計 約4L）	
使 用 洗 剤		キラリスタ（専用アルカリ洗剤）	
設 置 場 所		屋内	

※1 洗浄可能寸法は設計値です。車両の形状によっては寸法内でも洗浄できない場合があります。
また、タイヤのパターン形状によっては完全に洗浄できない場合があります。



※2 洗浄設定時間は5～50分の範囲でお使いください。

- 仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は一部販売商品と異なる場合があります。
- 本機を使用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。

タイヤ前後ピッチの調整範囲

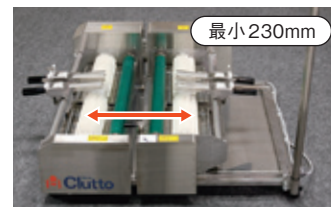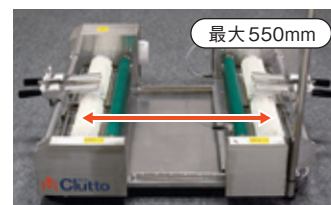

タイヤ左右ピッチの調整範囲

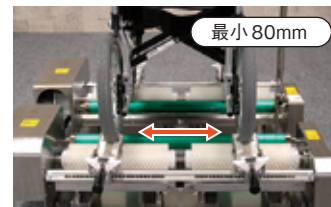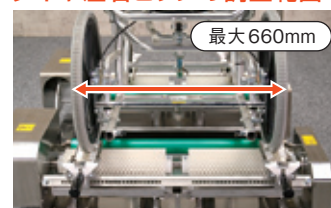

専用アルカリ洗剤 キラリスタ




クルットの洗浄力を最大に引き出す専用洗剤。泡立ちが少なくすすぎが簡単です。

やわらかウエイト 標準装備



安全な砂袋ウエイト(5kg)で、ブラシへの押付力をサポートします。

防水モーター(IP65)

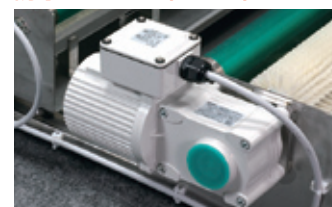

防水性に優れたモーターを採用していますので安心してご使用になれます。

- ・ロック付ダブルキャスタにより、移動・設置が容易です。
- ・操作ボックス取付け位置を設置場所に応じて変更可能(2力所)。
- ・水はねが殆どなく、排水設備がなくても設置可能です。

●お問い合わせは

株式会社前田製作所

〒388-8522長野県長野市篠ノ井御幣川1095

新規事業部 商品開発グループ

TEL.026-292-2220 FAX.026-293-5590

担当／伊藤・北島 Email: maedasp@maesei.co.jp



デミング賞
実施賞受賞会社



ISO 14001
JQA-EM1247